

Manufacturer: **BIONIME CORPORATION**

No. 100, Sec. 2, Daqing St., South Dist., Taichung City 40242, Taiwan

<http://www.bionime.com> E-mail: info@bionime.com

Made in Taiwan

EC REP

Emergo Europe BV

Prinsessegrach 20, 2514 AP The Hague, The Netherlands

CE
0197

101-3GP200-XXX
IT



BIONIME

Manuale di istruzioni

Introduzione	2
Requisiti di sistema del PC	3
Installazione	4
Impostazione della lingua	6
Creazione dei profili utente	8
Collegamento al PC	11
Caratteristiche principali	12
Scarico dei dati	14
Visualizzazione dei dati	16
Analisi dei dati (letture delle glicemie)	18
Statistiche avanzate	20
Stampa dei rapporti	28
Modifiche delle impostazioni dell'utente	29
Salvataggio e ripristino	30
Lista delle cose da fare (Promemoria)	32
Disinstallazione	33
Servizio clienti	34

Il software è progettato per aiutare i suoi utenti a gestire, visualizzare ed analizzare le letture della glicemia. Il software è destinato all'uso di operatori sanitari e di pazienti con diabete.

Il software dispone di più profili utente. Ogni utente deve creare un profilo per accedere. Una volta registrati, gli utenti possono scaricare i dati da un glucometro, visualizzare ed analizzare le letture delle glicemie e stampare i rapporti (grafici) direttamente dal PC. In più, gli utenti possono salvare e ripristinare i profili.

Il software è progettato per aiutare l'utente a scegliere (personalizzare) i modelli dei propri valori glicemici. Esso non fornisce una diagnosi e nemmeno suggerisce una terapia. Il Vostro Diabetologo può aiutarvi a trovare i comportamenti e a prendere decisioni sulla terapia, in linea con i valori glicemici. Si consiglia di non prendere decisioni sulla terapia senza l'aiuto e l'approvazione degli operatori sanitari. Cambiare farmaci senza controllo medico può essere pericoloso.

Contenuto della confezione:

1. CD di installazione (files di setup per il software e drivers per il cavetto di scarico dati).
2. Manuale d'uso del software.
3. Cavetto di scarico dati.
4. Istruzioni d'uso del cavetto.

Prima dell'installazione del software, si consiglia di accertarsi di essere in possesso dei seguenti requisiti:

- PC Microsoft Windows
- CPU: 550 MHz Intel Pentium 3 o superiore
- RAM: 512 MB o superiore
- Spazio sull'hard disk: 600 MB o superiore
- Sistema Operativo: Windows XP (Service Pack 3 o superiore), Windows Vista, o Windows 7
- Internet Explorer 7 o superiore
- USB 2.0 o superiore
- Schermo LCD con risoluzione 1024 X 768 o superiore, e 65536 colori o superiore
- Lettore CD-ROM o DVD
- Mouse e tastiera
- Stampante

Per installare il software, si prega di completare i seguenti passaggi:

1. Accendete il Vostro PC.
2. Inserite il CD di installazione.
3. Fate doppio click su Risorse del Computer.
4. Trovate e fate doppio click sul lettore CD. Di default, dovrebbe essere nominato "D".
5. Fate doppio click su "Software CD v1.3" e poi doppio click su "Software Setup v1.3 msi". Partirà il Software Setup Wizard (mostrato nella pagina successiva). Seguite le indicazioni per completare l'installazione. Una volta che l'installazione è stata completata, un collegamento denominato "Software" apparirà sul vostro desktop.
6. Eseguite i seguenti passaggi SOLO quando il cavetto di scarico dati è un adattatore cablato, ma NON quando viene fatto uso di tecnologia Bluetooth: tornate a "Risorse del Computer – Disco D", fate doppio click su "PL2303_Prolific_DriverInstaller_v1417.exe" (file di setup). Questo installerà i drivers del cavetto di scarico dei dati (PL2303). Seguire le indicazioni per completare l'installazione. Nessun collegamento per "PL2303" apparirà sul vostro desktop.
7. Trovate il collegamento del software sul desktop e cliccateci due volte in ogni occasione in cui desideriate usare il software.



NOTA

Se non siete in grado di scaricare i dati dal vostro strumento al termine dell'installazione del driver PC2303, si prega di scaricare l'ultima versione del driver PC2303 dal nostro sito web www.bioseven.it e di reinstallarlo; in alternativa, potete contattare il Servizio Clienti di Bioseven (800 913219) per chiedere aiuto.



NOTA

Le videate in questo Manuale Utente provengono da un PC con Windows 7. L'aspetto delle stesse può leggermente variare a seconda del sistema operativo del Vostro PC.

Impostazione della lingua


Dopo l'installazione, quando lanciate il software per la prima volta, vi verrà richiesto di scegliere fra diverse lingue. Selezionate la lingua che desiderate e cliccate su "OK" per portare a termine l'operazione.



 **NOTA**
Se avete scelto una lingua errata e desiderate selezionarne un'altra, si prega di disinstallare il software (fare riferimento alle istruzioni per la "Disinstallazione" a pagina 34) e reinstallare il software.

Impostazione della lingua

Se cliccate su "OK" senza selezionare nessuna lingua, apparirà una finestra che dice "Prego scegliere la lingua". Cliccate su "Si" per tornare all'impostazione della lingua.

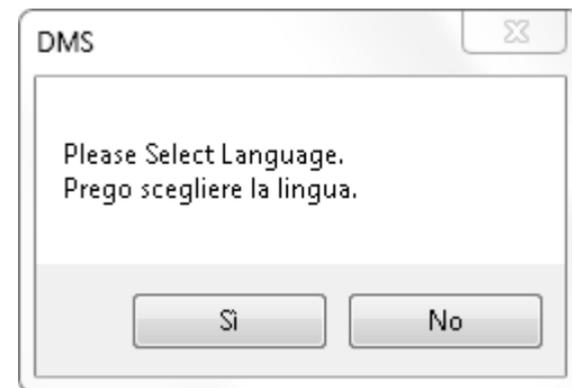



NOTA

1. Quando inserite i vostri dati, NON lasciate campi vuoti. Non sarete in grado di procedere con il successivo passaggio se un campo è vuoto.
2. Al fine di essere certi che tutte le vostre letture delle glicemie scaricate dallo strumento appaiano nelle rispettive fasce orarie del pasto, è estremamente importante che la pianificazione dei pasti che avete inserito coincida con gli attuali programmi del pasto quotidiano.
3. Secondo l'AACC (Associazione Americana di Chimica Clinica):
 - Iperglicemia è qualsiasi valore sopra i 126 mg/dl 126mg/dL.
 - L'intervallo di normalità per coloro che non hanno il diabete dovrebbe essere una lettura della glicemia fra 70 e 99 mg/dL.
4. Si consiglia di discutere con un professionista sanitario di quali valori inserire come intervalli della glicemia e limiti. Per maggiori informazioni si consiglia di visitare il seguente sito:
<http://www.labtestsonline.it>

Per connettere lo strumento della glicemia al vostro PC, si prega di fare riferimento alle allegate istruzioni del cavetto.




NOTA

Se il vostro dispositivo di connessione al PC è un adattatore wireless, assicuratevi che il driver del cavetto (PL2303) sia installato. Se non lo fosse, si prega di fare riferimento alle "Istruzioni" (a pagina 4) per l'installazione del driver. Se il dispositivo è Bluetooth, si prega di accertarsi che la connessione fra dispositivo e PC sia stabilita.

Caratteristiche principali

Una volta loggato, la "Pagina iniziale" (raffigurata sotto) apparirà a video. La pagina iniziale mostrerà le vostre ultime 10 glicemie e la vostra lista delle cose da fare (con le 5 più recenti). Mostrerà inoltre le icone di tutte le principali caratteristiche. Di seguito le descrizioni di ogni principale caratteristica (icona).

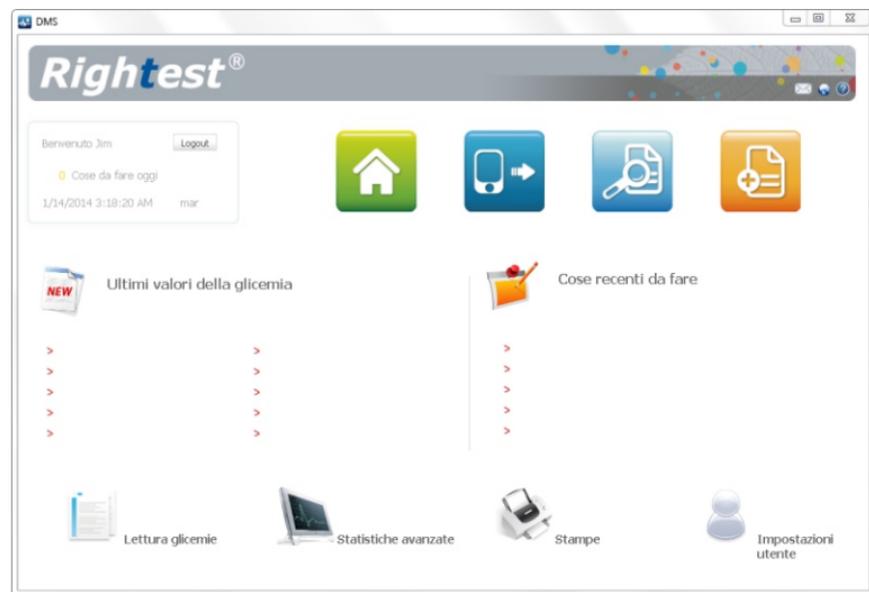

Caratteristiche principali



Pagina iniziale: vi consente di ritornare alla pagina iniziale.



Vista dati: vi consente di visualizzare le vostre glicemie.



Scarico dati: carica le glicemie dal vostro strumento.



Lista delle cose da fare (Promemoria): vi consente di inserire importanti promemoria con date, orari ed avvisi.



Letture delle glicemie: fornisce una vasta revisione delle vostre glicemie.



Statistiche avanzate: si tratta di un esame approfondito del grafico di tendenza e della distribuzione delle vostre glicemie.



Stampe: vi consente di stampare il "report" di analisi della glicemia e le informazioni relative all'utente.



Impostazioni utente: vi consente di modificare le vostre informazioni relative al profilo utente.



NOTA

  : Queste icone consentono di accedere ai servizi Bioseven via Web o E-mail.

 Aiuto: con questa icona si accede direttamente al manuale utente "online".

Tutte le glicemie dal vostro strumento, inclusa data ed ora, verranno trasferite al vostro PC.

Durante e dopo il trasferimento dei dati, le vostre letture (glicemie) non possono essere alterate o cancellate. Per scaricare i dati, si prega di completare i passaggi successivi.

1. Cliccate su "Scarico Dati"  per iniziare a trasferire i dati.
2. Mentre il trasferimento dei dati è in corso, dovrete vedere la sua percentuale di completamento.
3. Una volta che il trasferimento è completato, apparirà una schermata pop-up che dice "Import avvenuto con successo. Totale (di glicemie) ". Fare clic su "OK" per chiudere la finestra pop-up.
4. È possibile reimpostare "Pre Colazione", "Pre Pranzo", "Pre Cena", "Post Colazione", "Post Pranzo" e "Post Cena" per ogni risultato del test. (come mostrato a pagina 16), cliccando nella colonna di "pre / post pasto".
5. Cliccare su  per completare ed uscire.



NOTA

Per scaricare con successo i vostri dati, è necessario che il simbolo "PcL" appaia sullo schermo del Vostro strumento PRIMA che clicchiate "Scarico Dati". Se "PcL" non compare a schermo, si prega di fare riferimento alle allegate istruzioni per l'installazione del cavetto.

DMS

Porta Com: COM3 Ricomincia

Modello: GM780 Stampa

Stato: Import concluso con successo. Chiudi

Stato	Analisi	Data/Ora	Glicemia (mg/dL)	Pre/post pasto	Note
	<input checked="" type="checkbox"/>	11/1/2013 7:44:00 AM	117	Pre colazione.	
	<input checked="" type="checkbox"/>	11/1/2013 9:28:00 AM	237	Pre colazione.	
	<input checked="" type="checkbox"/>	11/1/2013 12:02:00 PM	542	Pre pranzo.	
	<input checked="" type="checkbox"/>	11/1/2013 2:17:00 PM	519	Post colazione.	
	<input checked="" type="checkbox"/>	11/1/2013 5:15:00 PM	58	Post pranzo.	
	<input checked="" type="checkbox"/>	11/1/2013 7:20:00 PM	578	Post cena.	
	<input checked="" type="checkbox"/>	11/1/2013 10:05:00 PM	268	Post cena.	
	<input checked="" type="checkbox"/>	11/2/2013 7:51:00 AM	23	Pre colazione.	

Legenda:

- <C> Risultato di un test con soluzione di controllo.
- <T> Risultato di un test eseguito al di fuori dei range di temperatura consigliati.
- <D> Il risultato del test non è incluso nel calcolo delle medie.
- <H> Valore superiore al massimo valore misurabile.
- <L> Valore inferiore al minimo valore misurabile.
- <@!> Errore nell'orario.
- <P!> Sport.
- <I!> Malattia.
- <S!> Evento particolare.

Visualizzazione dei Vostri dati

Il software vi consente di rivedere le glicemie dei precedenti 90 giorni. La tabella dei dati ed il grafico di tendenza appariranno sulla Pagina Iniziale.


La tabella dei dati fornirà informazioni su date, orari di pasto. Potete scegliere fra sei differenti periodi orari preimpostati per vedere i vostri dati.

Sul grafico di tendenza, ci saranno due linee che rappresentano i limiti dell'iperglicemia e dell'ipoglicemia. L'intervallo di normalità della glicemia si trova fra questi due valori. I limiti e l'intervallo possono aiutarvi a meglio comprendere le vostre glicemie. Per visualizzare i vostri dati, si prega di completare i passaggi successivi:

1. Cliccate su "Vista dati"  Il software mostrerà automaticamente le glicemie degli ultimi 30 giorni.
2. Potete selezionare un diverso periodo predeterminato, localizzato alla sinistra della tabella dei dati.

Visualizzazione dei Vostri dati

1 Giorno	Numero	Data/Ora	Glicemia	Pre/post pasto
7 Giorni	1	1/1/2014 7:02:00 AM	116 mg/dL	Pre colazione.
14 Giorni	2	1/1/2014 9:13:00 AM	488 mg/dL	Post colazione.
30 Giorni	3	1/1/2014 12:02:00 PM	181 mg/dL	Pre pranzo.
60 Giorni	4	1/1/2014 2:18:00 PM	421 mg/dL	Post pranzo.
90 Giorni	5	1/1/2014 5:52:00 PM	503 mg/dL	Pre cena.
	6	1/1/2014 7:24:00 PM	330 mg/dL	Post cena.
	7	1/1/2014 10:41:00 PM	492 mg/dL	Post cena.
	8	1/2/2014 7:16:00 AM	269 mg/dL	Pre colazione.
	9	1/2/2014 9:20:00 AM	124 mg/dL	Post colazione.

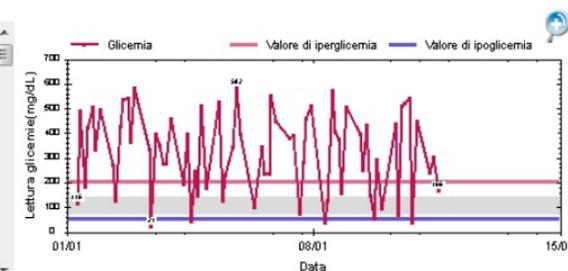


1. Cliccate sullo "zoom"  per allargare il grafico di tendenza. Per uscire dalla vista "zoom", chiudere semplicemente la finestra.
 2. Assicuratevi di consultare un professionista della salute prima di inserire i limiti di iperglicemia ed ipoglicemia, così come per l'intervallo di normalità.
 3. Sul grafico di tendenza:
 -  - L'area grigia compresa fra i limiti indica l'intervallo di normalità.
 -  - La linea fucsia rappresenta il valore di iperglicemia.
 -  - La linea blu rappresenta il valore di ipoglicemia.
- Se muovete il cursore del vostro mouse sopra la linea di andamento, sarete in grado di vedere le vostre glicemie.

Cliccate sull'icona "Letture delle glicemie"  per visualizzare ed analizzare le vostre glicemie.

Istruzioni per l'Analisi del Dato:

- Potete scegliere fra sette diversi periodi: 1 Giorno, 7 Giorni, 14 Giorni, 21 Giorni, 30 Giorni, 60 Giorni o 90 Giorni. Potete anche inserire un periodo personalizzato.
- Potete scegliere fra nove differenti periodi del pasto: Pre/Post Colazione, Pre/Post Pranzo, Pre/Post Cena, Pre/Post Pasto, oppure Visualizza tutti i dati.
- Le vostre glicemie saranno rappresentate da diversi colori:
 -  [Rosso] questa glicemia è più elevata del valore di iperglicemia
 -  [Arancio] questa glicemia è considerata un alto valore anomalo
 -  [Verde] questa glicemia è all'interno dell'intervallo di normalità
 -  [Blu] questa glicemia è considerata un basso valore anomalo
 -  [Indaco] questa glicemia è più bassa del valore di ipoglicemia
 -  [Bianco] ERRORE nel dato
- Il software ha cinque diversi metodi di visualizzare i vostri dati con l'analisi statistica: Vedi Tutti i Dati, Analisi di tutti i dati, Valor medio, Deviazione Standard e Coefficiente di Variazione. Nella tabella potete vedere la percentuale di ogni tipo di glicemia.
- Quando si analizzano i vostri dati, potete scegliere particolari valori da visualizzare. Tenete a mente che i valori non selezionati saranno esclusi da tutti i calcoli e stampe in Analisi dei Dati e Statistiche Avanzate.

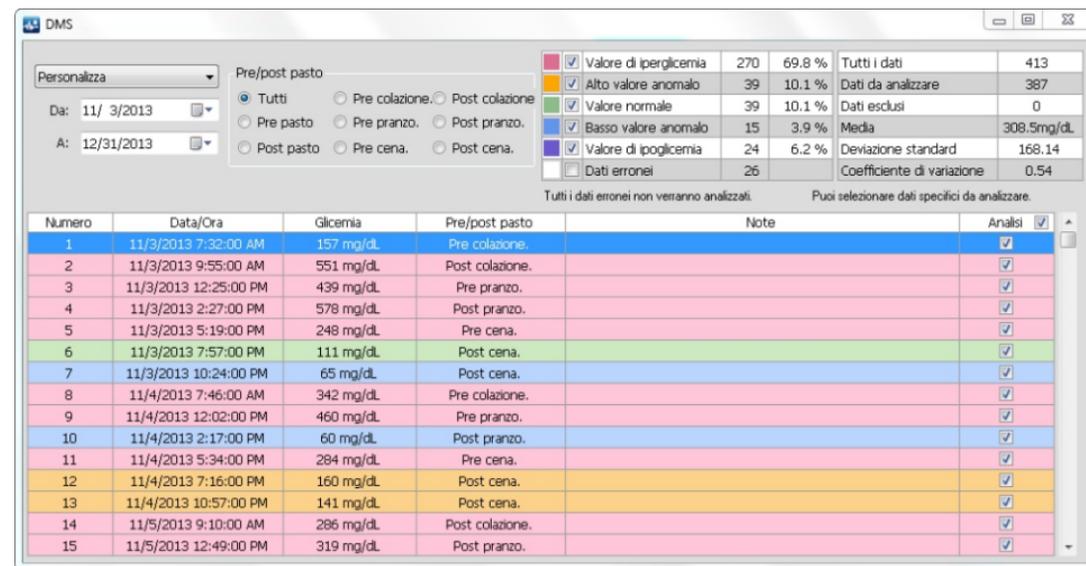

Numero	Data/Ora	Glicemia	Pre/post pasto	Note	Analisi
1	11/3/2013 7:32:00 AM	157 mg/dL	Pre colazione.		<input checked="" type="checkbox"/>
2	11/3/2013 9:55:00 AM	551 mg/dL	Post colazione.		<input checked="" type="checkbox"/>
3	11/3/2013 12:25:00 PM	439 mg/dL	Pre pranzo.		<input checked="" type="checkbox"/>
4	11/3/2013 2:27:00 PM	578 mg/dL	Post pranzo.		<input checked="" type="checkbox"/>
5	11/3/2013 5:19:00 PM	248 mg/dL	Pre cena.		<input checked="" type="checkbox"/>
6	11/3/2013 7:57:00 PM	111 mg/dL	Post cena.		<input checked="" type="checkbox"/>
7	11/3/2013 10:24:00 PM	65 mg/dL	Post cena.		<input checked="" type="checkbox"/>
8	11/4/2013 7:46:00 AM	342 mg/dL	Pre colazione.		<input checked="" type="checkbox"/>
9	11/4/2013 12:02:00 PM	460 mg/dL	Pre pranzo.		<input checked="" type="checkbox"/>
10	11/4/2013 2:17:00 PM	60 mg/dL	Post pranzo.		<input checked="" type="checkbox"/>
11	11/4/2013 5:34:00 PM	284 mg/dL	Pre cena.		<input checked="" type="checkbox"/>
12	11/4/2013 7:16:00 PM	160 mg/dL	Post cena.		<input checked="" type="checkbox"/>
13	11/4/2013 10:57:00 PM	141 mg/dL	Post cena.		<input checked="" type="checkbox"/>
14	11/5/2013 9:10:00 AM	286 mg/dL	Post colazione.		<input checked="" type="checkbox"/>
15	11/5/2013 12:49:00 PM	319 mg/dL	Post pranzo.		<input checked="" type="checkbox"/>



NOTA


I dati nello strumento con un ERRORE saranno trasferiti al database, ma saranno esclusi da tutti i calcoli ed analisi.

Cliccate sull' icona "Statistiche avanzate"  per visualizzare il grafico delle Statistiche Avanzate. Selezionare o "Andamento glicemia" o "Distribuzione glicemie".

Istruzioni per il grafico di tendenza delle glicemie:


1. Potete visualizzare dati relativi a diversi periodi di tempo: 1 Giorno, 7 Giorni, 14 Giorni, 21 Giorni, 30 Giorni, 60 Giorni e 90 Giorni. Potete anche inserire un periodo personalizzato.
2. Potete visualizzare dati relativi a differenti orari dei pasti: Pre/Post Colazione, Pre/Post Pranzo, Pre/Post Cena, Pre/Post Pasto o Visualizza tutti i dati.
3. Il grafico di tendenza può mostrare o una curva di regressione o una linea spezzata di media. La curva di regressione vi consente di vedere i modelli a lungo termine del periodo di tempo selezionato. La linea spezzata di media vi consente di vedere i cambiamenti a breve termine all' interno del periodo di tempo selezionato.

-  **NOTA**
1. Potete deselezionare "Punto di valore" dalle vostre letture, se non desidera che vengano visualizzati. Così, verranno mostrati solo i minimi e massimi valori. Quando muovete il cursore del vostro mouse lungo la linea di tendenza, mostrerà data, ora e valore di quella particolare lettura.
 2. Se selezionate soltanto un giorno per visualizzare le vostre letture, la curva di regressione e la linea spezzata di media NON verranno mostrate.
 3. Cliccate sullo "Zoom"  per ingrandire il grafico di tendenza. Per uscire dalla vista a zoom, chiudete semplicemente la finestra.
 4. Sul grafico di tendenza :
 -  - L' area grigia fra i limiti indica l'intervallo di normalità della glicemia.
 -  - La linea porpora è il valore di iperglicemia.
 -  - La linea blu è il valore di ipoglicemia.

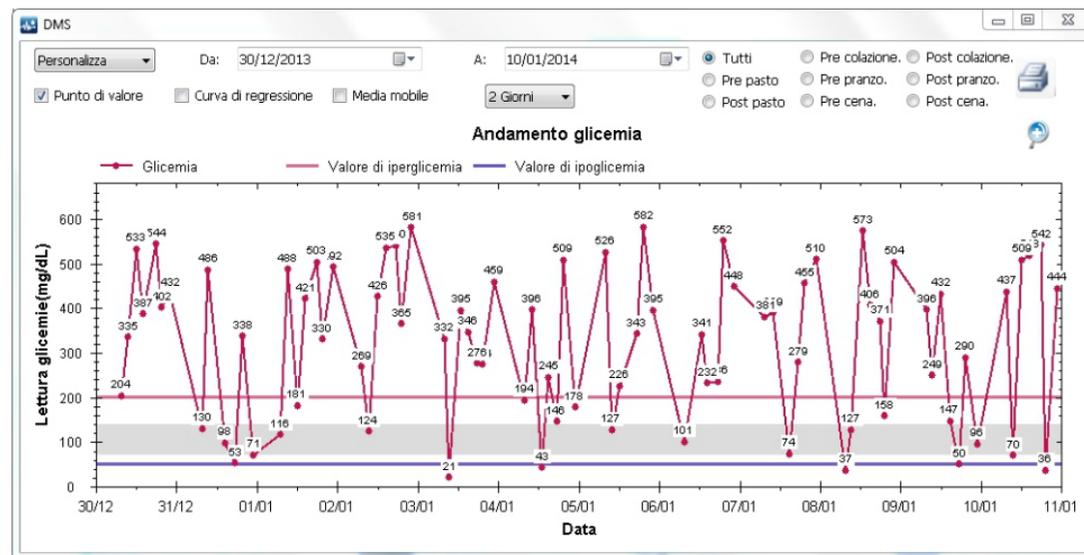

L'andamento delle glicemie può essere stampato in una pagina. Si prega di completare i seguenti passaggi:


1. Cliccare sull'icona  per l'Anteprima di Stampa.
2. Cliccare sull'icona  nella pagina dell'Anteprima.
3. Cliccare su per stampare l'andamento delle glicemie.

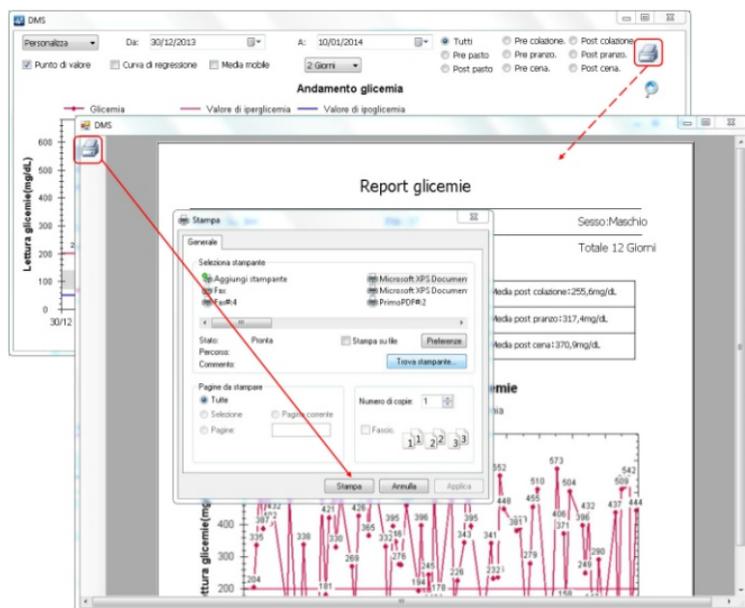

Il software vi consente di visualizzare le vostre glicemie in diversi formati, inclusi grafici a torta. Tuttavia, la percentuale di ogni glicemia non è disponibile nel grafico a torta.

Istruzioni per il grafico a torta:

1. Potete mostrare alcune glicemie selezionando i diversi periodi di tempo: 1 Giorno, 7 Giorni, 14 Giorni, 21 Giorni, 30 Giorni, 60 Giorni o 90 Giorni. Potete anche inserire un periodo di tempo selezionato.
2. Nel grafico a torta, le vostre glicemie saranno rappresentate con differenti colori. La seguente è una **chiave di lettura** per i valori:
 -  [ROSSO] La glicemia è più elevata del valore di iperglicemia.
 -  [ARANCIO] La glicemia è considerata un alto valore anomalo.
 -  [VERDE] La glicemia è all' interno dell'intervallo di normalità.
 -  [BLU] La glicemia è considerata un basso valore anomalo.
 -  [INDACO] La glicemia è più bassa del valore di ipoglicemia.

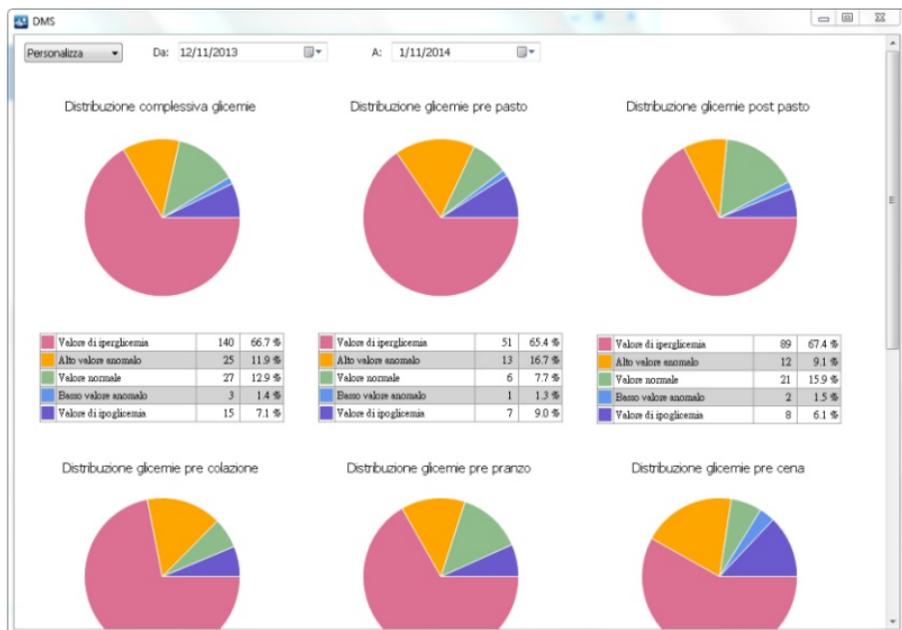

NOTA

Tutti gli errori all' interno dei dati NON verranno inclusi nel grafico a torta.


Informazioni sul grafico "giorno standard":

1. È possibile visualizzare i dati in base a diversi periodi di tempo: 1 giorno, 7 giorni, 14 giorni, 30 giorni, 60 giorni e 90 giorni. È anche possibile inserire un periodo di tempo personalizzato.
2. È possibile visualizzare i dati in base ai diversi orari dei pasti: Pre / Post colazione, Pre / Post pranzo, Pre / Post cena, Pre / Post pasto, o visualizzare tutti i dati.
3. Il grafico "giorno standard" può visualizzare il profilo di 24 ore delle letture nel periodo di tempo selezionato.




NOTA

1. È possibile deselezionare "Punto di Valore" dalle vostre glicemie se non si desidera che siano visualizzate. Quando si sposta il cursore del mouse su una glicemia, esso mostrerà la data, l'ora e il valore di quella specifica glicemia.
2. Clicare su  per ampliare il grafico del "giorno standard". Per uscire dalla videata con zoom, chiudere semplicemente la finestra.
3. Sul grafico del "giorno standard":
 -  - L'area grigia fra i limiti indica l'intervallo di normalità glicemica.
 -  - La linea fucsia rappresenta la soglia dei valori di iperglicemia.
 -  - Al di sotto della linea blu vi sono i valori di ipoglicemia.

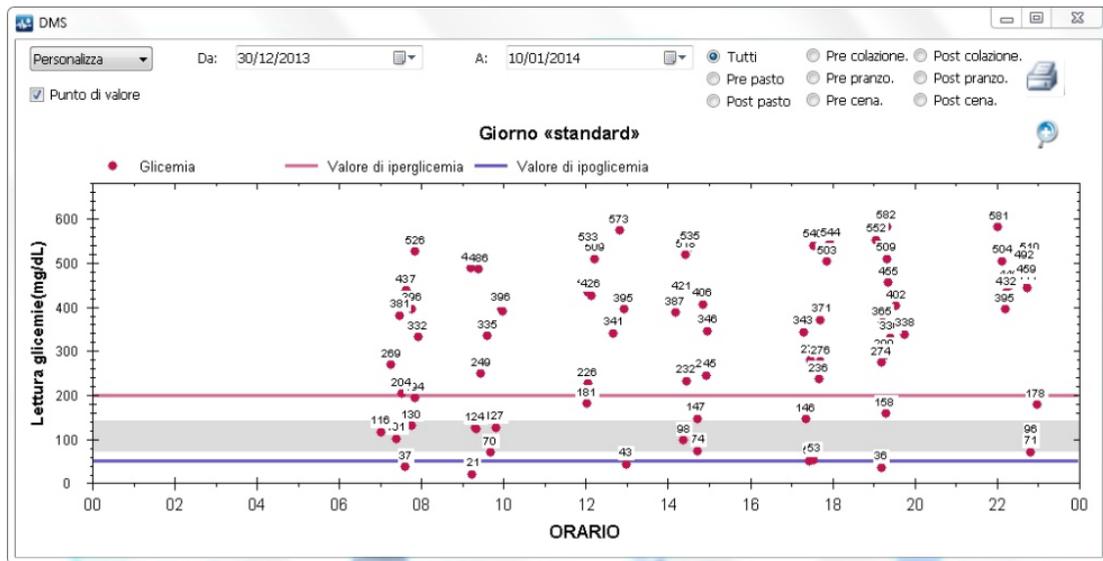

Il grafico del "giorno standard" può essere stampato in una pagina. Si prega di completare i seguenti passaggi.

1. Cliccare sull'icona  per l'Anteprima di Stampa.
2. Cliccare sull'icona  nella pagina dell'anteprima.
3. Cliccare su  per stampare il grafico del "giorno standard".

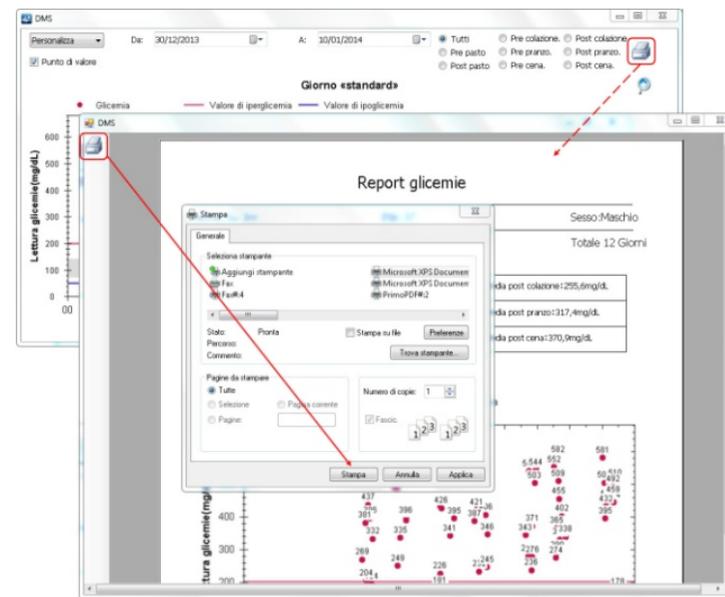

Il software vi consente di stampare le vostre glicemie ed i grafici.

Istruzioni sulla stampa:

1. Cliccate su "Stampe"  per accedere alle impostazioni di stampa.
2. Selezionare il periodo di tempo desiderato per le glicemie ed i grafici che intendiamo stampare.
3. Potete cliccare su "Stampe avanzate" per maggiori opzioni.



NOTA

1. Se desiderate stampare la curva di regressione e la linea spezzata di media, usate la funzione "Stampe Avanzate".
2. Se selezionate i dati di uno specifico giorno, la curva di regressione e la linea spezzata di media nel grafico di tendenza NON saranno disponibili per la stampa.

Dopo che vi siete loggati, potete aggiornare o modificare le informazioni del vostro profilo utente, utilizzando i seguenti passaggi:

1. Cliccate su "Impostazioni utente"  per accedere al vostro profilo utente.
2. Potete modificare le vostre informazioni personali (ad eccezione del nome), le impostazioni dell' orario dei pasti ed i limiti e gli intervalli delle glicemie.
3. Cliccate su "Salva e chiudi"  per salvare le vostre impostazioni.




NOTA

1. E' fondamentale che l'impostazione degli orari dei pasti inserita nel software sia coincidente con le vostre **abitudini quotidiane**.
2. Se qualche campo è lasciato vuoto o compilato non correttamente, il software non vi permetterà di continuare. Se non siete sicuri, cliccate "Impostazioni raccomandate".
3. Secondo la AACC (Associazione Americana Chimica Clinica) è considerato iperglicemia ogni valore più elevato di 126 mg/dl, e l'intervallo di normalità è ogni valore compreso fra i 70 ed i 99 mg/dL.
4. Accertatevi di aver consultato il Vostro Medico PRIMA di inserire i limiti e gli intervalli delle vostre glicemie. Per maggiori informazioni si prega di visitare il sito:<http://www.labtestsonline.it>

Potete salvare uno o più profili utente dalla schermata di benvenuto, prima di effettuare il login. Per salvare e ripristinare, si prega di completare i passaggi seguenti.


Passaggi per il salvataggio:

1. Cliccate su “Salva i dati”  , per salvare il vostro individuale profilo utente, oppure cliccate su “Salva tutti i dati”, per salvare tutti i profili utente.
2. Scegliete la cartella dove salvare i dati.
3. Cliccate su “OK”  per terminare il salvataggio.

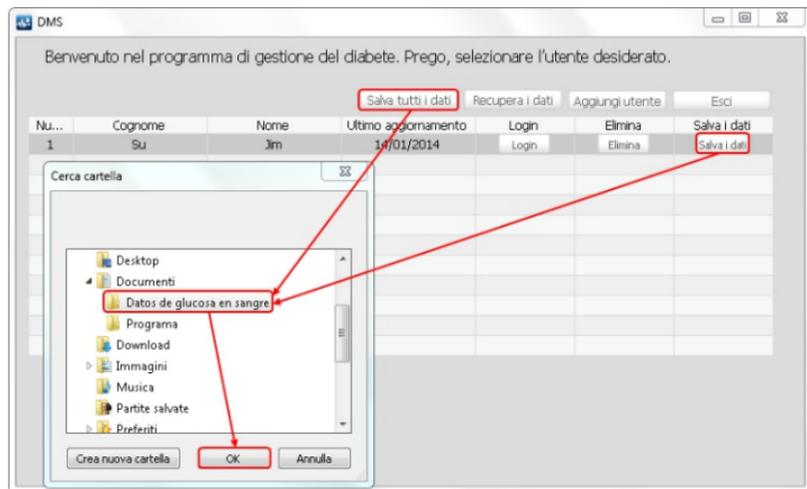

Passaggi per il ripristino:


1. Cliccate su “Recupera i dati”  per richiamare i vostri dati precedentemente salvati.
2. Selezionare il file che desiderate ripristinare.
3. Cliccate su “Apri”  per terminare il ripristino.

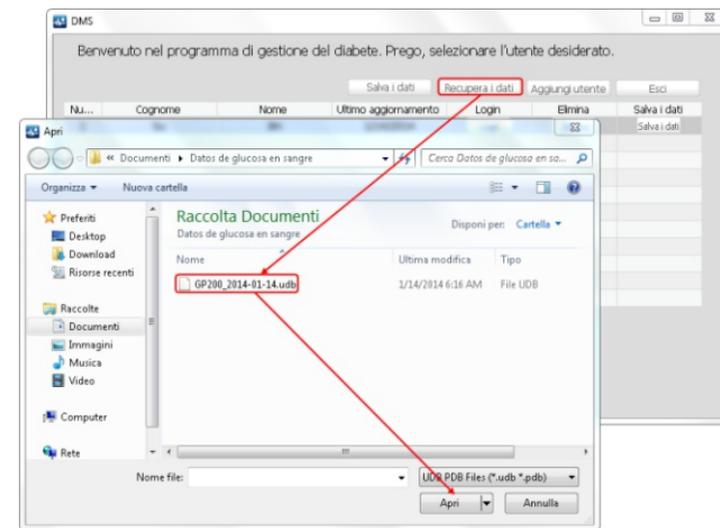

NOTA

Una volta recuperati i dati, il vostro profilo corrente sarà rimpiazzato dal profilo di salvataggio che avete selezionato.

Con il software è possibile impostare dei promemoria di eventi imminenti, dosaggio di farmaci o importanti commenti ed allarmi. Per creare dei promemoria, si prega di completare i seguenti passaggi.

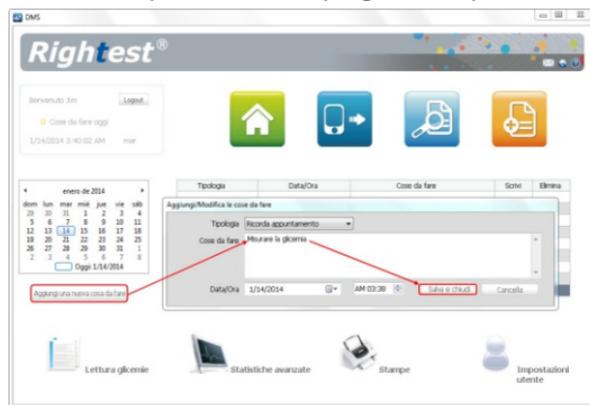

1. Cliccate su "Lista di cose da fare"  (**Promemoria**).
2. Cliccate su "Aggiungi una nuova cosa da fare"  per creare un nuovo evento.
 per creare un nuovo evento.
3. Inserite data ed ora, selezionate la tipologia del promemoria, ed inserite un appunto a proposito dell'evento.
4. Cliccate su "Salva e chiudi" per terminare e salvare.




NOTA

1. In ogni evento, il massimo numero di caratteri in nota è 255. Se eccedete questo valore, apparirà un messaggio di ERRORE.
2. Tutti i messaggi di promemoria vi allenteranno all'orario designato.

Per disinstallare il software, si prega di completare i seguenti passaggi.

1. Andate su "Pannello di controllo" e selezionate "Disinstallare un programma".
2. Trovate e selezionate "Software".
3. Cliccate su "Disinstalla", poi confermate cliccando "Sì" per disinstallare il programma.

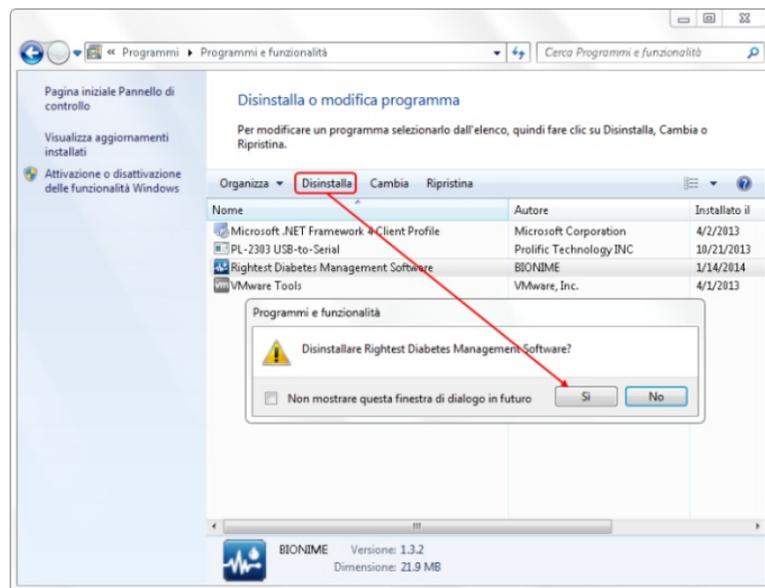

Servizio Clienti

Si prega di assicurarsi di leggere e rivedere TUTTE le istruzioni di questo Manuale Utente prima di utilizzare il software.

In BIOSEVEN, l'obiettivo del nostro numero (verde) è di assistere i nostri Clienti con un servizio completo e di alta qualità. Faremo tutto ciò che possiamo per assistervi con un Servizio Clienti soddisfacente.

Se avete domande o curiosità, si prega di contattare il Numero Verde Bioseven (800 913219).

In alternativa, potete contattarci via email all'indirizzo: info@bioseven.it. Oppure, cliccate sull'icona "Aiuto" sulla pagina iniziale del software. Verrete rimandati al Manuale Utente, contenente le più recenti informazioni.

Se avete domande o preoccupazioni legate allo stato di salute, assicuratevi di contattare un Medico.